

CalmDown

by KRUUSE®

GB

CalmDown by KRUUSE® Post-Op Button, cats

Help cats feel safe, comfortable and relaxed.

Having to wear a collar can be stressful for cats. It interferes with their vision, smell and awareness.

The CalmDown by KRUUSE® Post-Op Button comforts cats and has a soothing effect because it mimics the natural comforting pheromones that a mother cat produces to soothe her kittens.

The button contains a scientifically tested pheromone that helps soothe cats in stressful situations.

It is non-invasive, easy to use and works for at least 10 days

The button is suitable for cats of all ages.
It can be used with all plastic collars.

Our click technology means you can simply click the button on the collar and let tranquillity settle in.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Choose the appropriate collar for your pet.
2. Find the pre-punched holes in the centre of the collar.
If there are no pre-punched holes in the collar, use the CalmDown by KRUUSE® Hole Applicator to create holes in the collar. Please follow the instructions on the packaging for the Hole Applicator.
3. Ensure the button is placed on the inside of the collar, with the logo facing inward towards the cat.
4. Calming pheromones are released as soon as the button is inserted.

Calming pheromone: 2%

Inert ingredients: 98%

Weight: 2.0 g.

SAFETY INSTRUCTIONS:

For animal use only. Wash hands thoroughly after contact with the button. If skin irritation occurs, seek medical advice and bring along the packaging. Always monitor the cat and seek veterinary attention if the cat ingests the product. Ensure that the product is stored safely, out of reach of children and away from food, animal feed, medicine or similar items. Store in a dry place. Dispose of the product and packaging in accordance with local regulations.

DK

CalmDown by KRUUSE® Post-Op Knap, katte.

Hjælper katte med at føle sig trygge, godt tilpas og afslappede.

Det kan være stressende for katte at skulle gå med krave.
Det forstyrrer deres syn, lugtesans og opmærksomhed.

CalmDown by KRUUSE® Post-Op Knap har en beroligende effekt på katte, fordi den efterligner de naturlige feromoner, som en kattermor producerer for at berolige sine killinger.

Knappen indeholder et videnskabeligt testet feromon, som hjælper med at berolige katte i stressede situationer.

Den er ikke-invasiv, nem at bruge og virker i minimum 10 dage.

Knappen er velegnet til katte i alle aldre. Den kan bruges med alle plastikkraver.

Med vores klik-teknologi skal du bare klikke knappen på kraven og lade roen sænke sig.

BRUGSANVISNING:

1. Vælg den rette krave til din patient.
2. Find de udstansede huller i midten af kraven.
Hvis der ikke allerede er udstansede huller i kraven, skal du bruge CalmDown by KRUUSE® Hultang til at lave huller i kraven. Følg anvisningerne på emballagen til hultangen.
3. Sørg for, at knappen sidder på indersiden af kraven, så logoet vender indad mod katten.
4. Når knappen sættes i, frigives der straks beroligende feromoner.


Beroligende feromon: 2 %

Inerte ingredienser: 98 %

Vægt: 2.0 g.

SIKKERHEDSANVISNINGER:

Kun til brug på dyr. Vask hænderne grundigt efter kontakt med knappen. I tilfælde af hudirritation skal du søge læge og medbringe emballagen. Hold altid øje med katten, og søg dyrlæge, hvis katten indtager produktet. Sørg for, at produktet opbevares sikkert, utilgængeligt for børn og på sikker afstand af fødevarer, dyrefoder, medicin eller lignende. Opbevar produktet på et tørt sted. Bortskaf produktet og emballagen i overensstemmelse med de lokale regler.

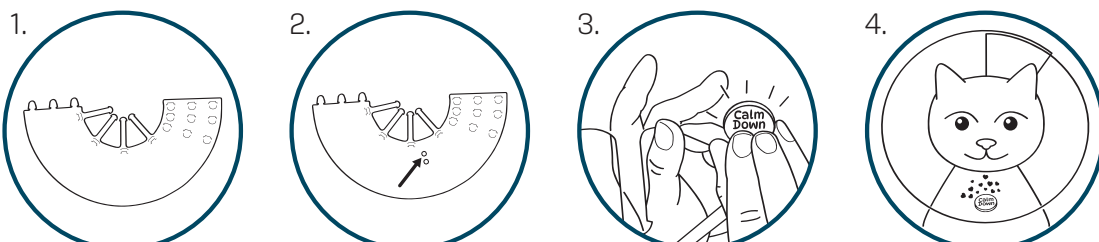

CalmDown

by KRUUSE®

NO

CalmDown by KRUUSE® Postoperativ knapp for katter.

Hjelper katter med å føle seg trygge, komfortable og rolige.

Det kan være stressende for katter å måtte gå med krage.
Det forstyrrer synet, luktesansen og oppmerksomheten deres.

CalmDown by KRUUSE® Postoperative Knapp har en beroligende effekt på katter fordi den etterligner de naturlige feromonene som katter produserer for å berolige kattungene sine.

Knappen inneholder et vitenskapelig testet feromon som bidrar til å berolige katter i stressende situasjoner.

Den er ikke-invasiv, enkel å bruke og virker i minst 10 dager.

Knappen passer for katter i alle aldre.
Den kan brukes med alle plastkrager.

Med vår klikk-teknologi er det bare å klikke knappen på kragen og la roen senke seg.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

1. Velg en krage som passer til pasienten.
2. Finn de utstansede hullene i midten av kragen.
Hvis det ikke er forhåndsstansede hull i kragen, bruker du CalmDown by KRUUSE® Hullmaskin til å lage hull. Følg instruksjonene på emballasjen til hullmaskinen.
3. Sørg for at knappen er plassert på innsiden av kragen, med logoen vendt innover mot katten.
4. Når knappen settes inn, frigjøres beroligende feromoner umiddelbart.

Beroligende feromon: 2 %
Passive ingredienser: 98 %
Vekt: 2.0 g.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER:

Skal kun brukes til dyr. Vask hendene grundig etter kontakt med knappen. Ved hudirritasjon, oppsøk lege og ta med deg emballasjen. Overvåk alltid katten og oppsøk veterinær dersom katten får i seg produktet. Sørg for at produktet oppbevares på en sikker måte, utilgjengelig for barn og unna mat, dyrefôr, medisiner og lignende. Oppbevares på et tørt sted. Avhend produktet og emballasjen i henhold til lokale forskrifter.

SE

CalmDown by KRUUSE® Postoperativ Knapp för katter.

Hjälper katter att känna sig trygga, bekväma och avslappnade.

Att behöva bära en krage kan vara stressande för katter.
Det stör deras syn, luktsinne och medvetenhet.

CalmDown by KRUUSE® Postoperative Knapp har en lugnande verkan för katter som genomgått operation eller av annan anledning behöver bära en krage genom att efterlikna de naturliga tröstande feromoner som kattmamman producerar för att lugna sina ungar.

Knappen innehåller ett vetenskapligt testat feromon som hjälper till att lugna katter i stressande situationer.

Den är icke-invasiv, lätt att använda och verkar i minst 10 dagar

Knappen är lämplig för katter i alla åldrar. Den kan användas med alla plastkragar.

Med vår klickteknologi klickar du bara i knappen på kragen och låter lugnet komma.

BRUKSANVISNING:


1. Välj lämplig storlek på krage för din patient.
2. Hitta de förstansade hålen i mitten av kragen.
Om det inte finns några förstansade hål i kragen, använd en CalmDown by KRUUSE® Håltång för att skapa hål i kragen. Följ instruktionerna på förpackningen för håltagaren.
3. Se till att knappen är placerad på insidan av kragen, med logotypen vänd inåt mot katten.
4. När knappen väl är insatt frigörs lugnande feromoner omedelbart.

Lugnande feromon: 2 %
Inerta ingredienser: 98 %
Vikt: 2.0 g.


SÄKERHETSANVISNINGAR:

Får endast användas för djur. Tvätta händerna noga efter kontakt med knappen. Om hudirritation uppstår, kontakta läkare. Ta med förpackningen. Håll alltid katten under uppsikt och uppsök veterinär om katten får i sig produkten. Produkten ska förvaras på ett säkert sätt, utom räckhåll för barn och på avstånd från livsmedel, djurfoder, läkemedel och liknande. Förvaras torrt. Kassera produkten och förpackningen enligt gällande anvisningar.

1.

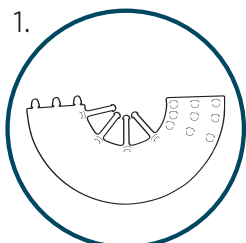


2.

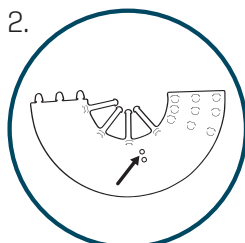

3.



4.

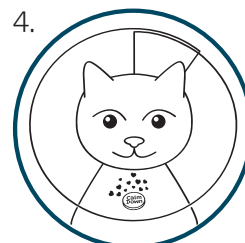

CalmDown

by KRUUSE®

DE

CalmDown by KRUUSE® Postoperativer Knopf für Katzen.

Hilft Katzen, sich sicher, wohl und entspannt zu fühlen.

Das Tragen eines Halskragens kann für Katzen stressig sein. Es beeinträchtigt ihr Sehvermögen, ihren Geruchssinn und ihre Wahrnehmung.

Der CalmDown by KRUUSE® Postoperative Knopf hat eine beruhigende Wirkung auf Katzen, indem er die natürlichen Pheromone abgibt, die eine Katzenmutter produziert, um ihre Kätzchen zu beruhigen.

Der Knopf enthält ein wissenschaftlich getestetes Pheromon, das Katzen in Stresssituationen beruhigen kann.

Er ist nicht invasiv, einfach zu handhaben und wirkt mindestens 10 Tage lang.

Der Knopf ist für Katzen jeden Alters geeignet. Er kann mit allen Kunststoffhalskragen verwendet werden.

Mit unserer Klick-Technik lässt sich der Knopf ganz einfach am Halskragen befestigen und schon kehrt Ruhe ein.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Wählen Sie den passenden Halskragen für Ihren Patienten.
2. Suchen Sie die vorgestanzten Löcher in der Mitte des Halskragens. Wenn der Halskragen keine vorgestanzten Löcher hat, verwenden Sie den CalmDown by KRUUSE® Stanzer, um Löcher in den Halskragen zu stanzen. Bitte beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Stanzers.
3. Achten Sie darauf, dass der Knopf an der Innenseite des Halskragens angebracht wird, wobei das Logo nach innen zur Katze zeigt.
4. Sobald der Knopf eingesteckt ist, werden sofort beruhigende Pheromone freigesetzt.

Beruhigende Pheromone: 2 %
Inerte Bestandteile: 98 %
Gewicht: 2.0 g.

SICHERHEITSHINWEISE:

Nur zur Verwendung an Tieren. Waschen Sie sich nach dem Kontakt mit dem Knopf gründlich die Hände. Bei Hautreizungen ist ein Arzt aufzusuchen. Bringen Sie bitte die Verpackung mit. Beobachten Sie die Katze immer und suchen Sie einen Tierarzt auf, wenn die Katze das Produkt verschluckt hat. Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher, außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Tierfutter, Medikamenten oder ähnlichen Gegenständen aufbewahrt wird. An einem trockenen Ort aufbewahren. Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

NL

CalmDown by KRUUSE® Postoperatieve Knop voor katten.

Helpt katten om zich veilig, comfortabel en ontspannen te voelen.

Het dragen van een kraag kan stressvol zijn voor katten. Hun zicht, reukvermogen en bewustzijn worden verstoord.

De CalmDown by KRUUSE® Postoperatieve Knop stelt katten gerust en heeft een kalmerend effect omdat deze de natuurlijke kalmerende feromonen nabootst die een moederkat produceert om haar kittens te kalmeren.

De knop bevat een wetenschappelijk getest feromoon dat katten helpt kalmeren in stressvolle situaties.

Niet-invasief, gemakkelijk te gebruiken en minstens 10 effectief.

De knop is geschikt voor katten van alle leeftijden. De knop kan gebruikt worden met alle kunststof kragen.

Dankzij onze kliktechnologie hoeft u alleen maar op de knop op de kraag te klikken en de rust te laten wederkeren.


GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Kies de juiste kraag voor uw patiënt.
2. Zoek de voorgeboorde gaten in het midden van de kraag. Als er geen voorgeboorde gaten in de kraag zitten, gebruik dan de CalmDown by KRUUSE® gatenapplicator om gaten in de kraag te maken. Volg de instructies op de verpakking van de gatenapplicator.
3. Zorg ervoor dat de knop aan de binnenkant van de kraag zit, met het logo naar binnen gericht, richting de kat.
4. Zodra de knop is ingebracht, komen de kalmerende feromonen onmiddellijk vrij.

Kalmerend feromoon: 2%
Inerte stoffen: 98%
Gewicht: 2.0 gr.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES:

Alleen voor gebruik bij dieren. Handen grondig wassen na contact met de knop. Raadpleeg bij huidirritatie een arts en neem de verpakking mee. Houd de kat altijd in de gaten en roep de hulp van een dierenarts in als de kat het product binnenkrijgt. Bewaar het product veilig, buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van voedingsmiddelen, diervoeder, medicijnen en dergelijke. Droog bewaren. Gooi het product en de verpakking weg volgens de plaatselijke voorschriften.

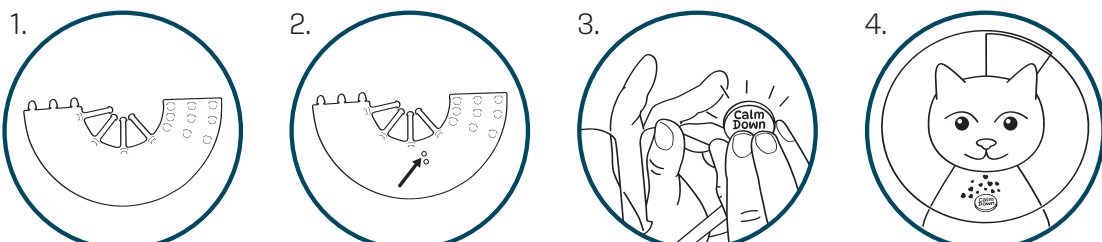



CalmDown

by KRUUSE®

ES

CalmDown by KRUUSE® Botón Posoperatorio para gatos.

Ayuda a los gatos a sentirse seguros, cómodos y relajados.

Tener que llevar collar puede ser estresante para los gatos. Interfiere con su visión, olfato y percepción.

The CalmDown by KRUUSE® El Botón posoperatorio reconforta a los gatos y posee un efecto calmante porque imita las feromonas reconfortantes naturales que produce una gata lactante para calmar a sus cachorros.*

El botón contiene una feromona científicamente probada que ayuda a calmar a los gatos en situaciones de estrés.

No es invasivo, es fácil de usar y funciona hasta 10 días. El botón es adecuado para gatos de todas las edades. Se puede utilizar con todos los collares de plástico.

Con nuestra tecnología de clic, basta con pulsar el botón del collar y dejar que se tranquilice.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Elija el collar adecuado para su paciente.
2. Busque los orificios previamente perforados en el centro del collar. Si no hay orificios previamente perforados en el collar, utilice el aplicador de agujeros CalmDown by KRUUSE® para hacer orificios en el collar. Siga las instrucciones del envase del aplicador de agujeros.
3. Asegúrese de que el botón se coloca en la parte interior del collar, con el logotipo mirando hacia dentro, hacia el gato.
4. Una vez colocado el botón, se liberan inmediatamente feromonas calmantes.

Feromona calmante: 2 %
Ingredientes inactivos: 98 %
Peso: 2.0 g.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Solo para uso animal. Lávese bien las manos después de entrar en contacto con el botón. Si se produce irritación en la piel, consulte a un médico y lleve consigo el envase. Vigile al gato siempre y acuda al veterinario si el gato ingiere el producto. Asegúrese de que el producto esté almacenado de forma segura, fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos, piensos, medicamentos o artículos similares. Almacene en un lugar seco. Deseche el producto y el envase de acuerdo con la normativa local.

PT

CalmDown by KRUUSE® Botão Pós-operatório para gatos.

Ajuda os gatos a sentirem-se seguros, confortáveis e relaxados.

O uso de um colar pode ser stressante para os gatos. Interfere na visão, no olfato e na consciência.

O CalmDown by KRUUSE® Botão Pós-operatório conforta os gatos e tem um efeito calmante porque imita os feromonas naturais reconfortantes que a gata produz para acalmar as suas crias.

O botão contém uma feromona testada cientificamente que ajuda a acalmar os gatos em situações stressantes.

É não invasivo, fácil de utilizar e funciona durante pelo menos 10 dias.

É não invasivo, fácil de usar e funciona durante até 10 dias. O botão é adequado para cães de todas as idades. Pode ser usado com todos os colares de plástico.

Com a nossa tecnologia de clique, basta clicar no botão do colar e deixar a tranquilidade instalar-se.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:


1. Escolha o colar apropriado para o seu paciente.
2. Localize os orifícios pré-perfurados no centro do colar. Se não houver orifícios pré-perfurados no colar, use o Aplicador de Orifícios CalmDown by KRUUSE® para fazer orifícios no colar. Siga as instruções na embalagem do aplicador de orifícios.
3. Certifique-se de que o botão está colocado na parte interna do colar, com o logótipo virado para dentro, em direção ao gato.
4. Assim que o botão é inserido, são imediatamente libertadas feromonas calmantes.

Feromona calmante: 2%
Ingredientes inertes: 98%
Peso: 2.0 g.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Apenas para uso animal. Lavar bem as mãos após o contacto com o botão. Em caso de irritação cutânea, consultar um médico e levar a embalagem. Monitorizar sempre o gato e procurar assistência veterinária se o gato ingerir o produto. Certifique-se de que o produto é armazenado de forma segura, fora do alcance das crianças e afastado de alimentos, rações para animais, medicamentos ou artigos semelhantes. Armazenar num local seco. Eliminar o produto e a embalagem de acordo com os regulamentos locais.

1.

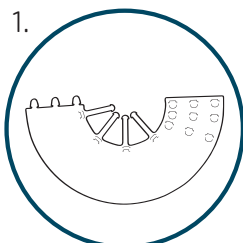


2.

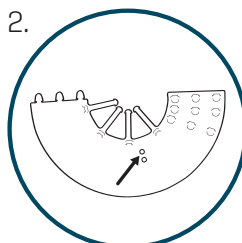

3.



4.

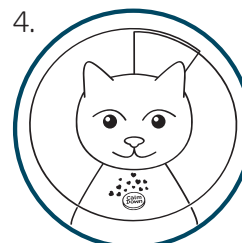

CalmDown

by KRUUSE®

FR

CalmDown by KRUUSE® Bouton Post-opérateur pour chat.

Aide les chats à se sentir en sécurité, confortable et détendus.

Le port d'un collier peut être stressant pour les chats. Cela interfère avec leur vision, leur odorat et leur conscience.

Le CalmDown by KRUUSE® Bouton Post-opérateur reconforte votre chat grâce à son effet apaisant qui imite les phéromones relaxantes et naturelles produites par la mère pour soulager ses chatons.

Le bouton contient une phéromone scientifiquement testée qui aide à apaiser les chats dans les situations stressantes.

Il est non invasif, simple d'utilisation et fonctionne pendant au moins 10 jours. Le bouton convient aux chats de tout âge. Il peut être utilisé avec tous les colliers en plastique.

Grâce à notre technologie de clic, il suffit de cliquer le bouton dans les trous pré-perforés situés sur le col pour diffuser la tranquillité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

1. Choisissez le collier approprié pour votre patient.
2. Trouvez les trous pré-perforés au centre du collier.
S'il n'y a pas de trous pré-perforés dans le collier, utilisez l'applicateur de trous CalmDown by KRUUSE® pour créer des trous dans le collier. Veuillez suivre les instructions figurant sur l'emballage de l'applicateur de trous.
3. Assurez-vous que le bouton est placé à l'intérieur du collier, avec le logo tourné vers l'intérieur en direction du chat.
4. Une fois le bouton inséré, les phéromones calmantes sont libérées immédiatement.

Phéromone calmante : 2 %

Ingrédients inertes : 98 %

Poids : 2,0 g.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Uniquement réservé à l'usage animal. En cas de contact avec le bouton, lavez-vous soigneusement les mains. En cas d'irritation cutanée, consultez un médecin en apportant l'emballage du produit. Surveillez toujours le chat et consultez un vétérinaire s'il ingère le produit. Assurez-vous de stocker le produit en lieu sûr, hors de portée des enfants et à l'écart de la nourriture (humaine et animale), des médicaments ou de tout autre produit similaire. À conserver dans un endroit sec. Jetez le produit et son emballage conformément aux réglementations locales.

IT

CalmDown by KRUUSE® Pulsante Post-Op per gatti.

Aiuta i gatti a sentirsi al sicuro, a loro agio e rilassati.

Per i gatti, dover indossare un collare può essere stressante. Interferisce con la vista, l'olfatto e la consapevolezza.

Il CalmDown by KRUUSE® Post-Op Button conforta i gatti e ha un effetto lenitivo perché imita i feromoni naturali e rassicuranti prodotti dalla gatta per tranquillizzare i suoi gattini

Il pulsante contiene un feromone scientificamente testato che aiuta a calmare i gatti in situazioni di stress.

Non è invasivo, facile da utilizzare e funziona per almeno 10 giorni.

È un metodo non invasivo, facile da usare e funziona fino a 10 giorni. Il pulsante è adatto a cani di tutte le età. Può essere utilizzato con tutti i collari in plastica.

Grazie alla nostra tecnologia a clic, basta premere il pulsante sul collare e lasciare che la tranquillità prenda il sopravvento.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Scegli il collare più adatto al tuo paziente.
2. Individuare i buchi preforati al centro del collare.
Se il collare non presenta buchi preforati, utilizzare l'Applicatore per fori CalmDown by KRUUSE® per creare dei fori nel collare. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione dell'applicatore forato.
3. Assicuratevi che il bottone sia posizionato all'interno del collare, con il logo rivolto verso l'interno, in direzione del gatto.
4. Una volta inserito il pulsante, vengono rilasciati immediatamente feromoni calmanti.




Feromone calmante: 2%

Ingrédients inertes: 98%

Peso: 2.0 g.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Solo per uso animale. Lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con il clicker. In caso di irritazione cutanea, consultare un medico e portare con sé la confezione. Monitorare sempre il gatto e rivolgersi a un veterinario se ingerisce il prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia conservato in modo sicuro, fuori dalla portata dei bambini e lontano da alimenti, mangimi, medicinali o articoli simili. Conservare in un luogo asciutto. Smaltire il prodotto e la confezione nel rispetto delle normative locali.

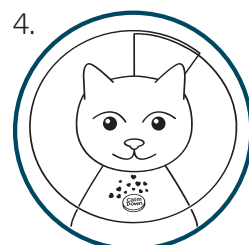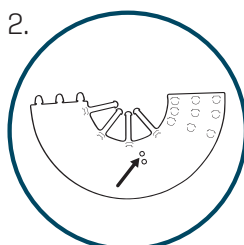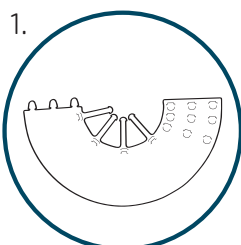



CalmDown

by KRUUSE®

PL

CalmDown by KRUUSE® Dyfuzor pooperacyjny dla kotów.

Sprawia, że koty czują się bezpieczne, swobodne i odprężone.

Noszenie kołnierza może być stresujące dla kotów. Kołnierz ogranicza im pole widzenia, odczuwanie zapachu i zmysł orientacji.

The CalmDown by KRUUSE® Dyfuzor pooperacyjny uspokaja koty i działa kojąco, ponieważ naśladuje naturalne feromony, które produkuje kotka, aby uspokoić swoje kocięta.

Dyfuzor zawiera naukowo przebadany feromon, który pomaga uspokoić koty w stresujących sytuacjach.

Produkt nieinwazyjny, łatwy w użyciu i działa przez co najmniej 10 dni.

Dyfuzor nadaje się dla psów w każdym wieku. Może być używany ze wszystkimi kołnierzami z tworzywa sztucznego.

Dzięki technologii kliknięcia, wystarczy przycisnąć dyfuzor na kołnierzu, aby zwierzę poczuło spokój.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Wybierz odpowiedni kołnierz dla swojego pacjenta.
2. Znajdź wstępnie wycięte otwory w środku kołnierza. Jeśli w kołnierzu nie ma wstępnie wyciętych otworów, do wycięcia otworów w kołnierzu użyj dziurkacza CalmDown by KRUUSE®. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu dziurkacza.
3. Upewnij się, że dyfuzor jest umieszczony po wewnętrznej stronie kołnierza, z logo skierowanym do wewnątrz w kierunku kota.
4. Po włożeniu dyfuzora natychmiast uwalniane są uspokajające feromony.

Feromon uspokajający: 2%

Składniki obojętne: 98%

Masa: 2.0 g.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Wyłącznie dla zwierząt. Należy dokładnie umyć ręce po kontakcie z dyfuzorem. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry, należy zasięgnąć porady lekarza i zabrać ze sobą opakowanie. Zawsze monitorować kota i zwrócić się o pomoc weterynaryjną w przypadku połknięcia produktu przez kota. Należy dopilnować, aby produkt był przechowywany bezpiecznie, poza zasięgiem dzieci i z dala od żywności, karmy dla zwierząt, leków lub podobnych przedmiotów. Przechowywać w suchym miejscu. Produkt i opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

FI

CalmDown by KRUUSE® -postoperatiivinen nappi kissoille.

Auta kissoja tuntemaan olonsa turvalliseksi, mukavaksi ja rentoutuneeksi.

Kaulurin käyttäminen voi olla kissoille stressaavaa. Se häiritsee niiden näköä, hajua ja tietoisuutta.

The CalmDown by KRUUSE® -postoperatiivinen nappi auttaa kissaa tuntemaan olonsa miellyttäväksi, ja sillä on rauhoittava vaikutus, koska se jäljittelee luonnollisia feromoneja, joita emokissa tuottaa rauhoittaakseen pentujaan.

Nappi sisältää tieteellisesti testattua feromonia, joka auttaa rauhoittamaan kissoja stressitilanteissa.

Se on noninvasiivinen ja helppokäyttöinen, ja se toimii vähintään 10 päivää.

Nappi sopii kaikenikäisille kissoille.

Sitä voidaan käyttää kaikkien muovikaulurien kanssa.

Helppokäyttöisen kiinnitysteknologiamme ansiosta napsautat vain kaulurin painiketta ja annat kissasi rauhoittua.

KÄYTTÖOHJE:

1. Valitse lemmikillesi sopiva kauluri.
2. Etsi kaulurin keskellä olevat valmiit reiät. Jos kaulurissa ei ole valmiiksi rei'itettyjä reikiä, käytä CalmDown By KRUUSE® -rei'ittäjää reikien tekemiseen kauluriin. Noudata rei'ittäjän pakkauksessa olevia ohjeita.
3. Varmista, että nappi asetetaan kaulurin sisäpuolelle siten, että logo on sisäänpäin kissaa kohti.
4. Kun nappi asetetaan paikalleen, rauhoittavia feromoneja vapautuu välittömästi.

Rauhoittava feromoni: 2%


Reagoimattomat ainesosat: 98 %

Paino: 2.0 g.


TURVALLISUUSOHJEET:

Sopii vain eläinkäyttöön. Pese kätesi huolellisesti kosketettuasi nappia. Jos iholla ilmenee ärsytystä, hakeudu lääkärin hoitoon ja ota pakkaus mukaan. Tarkkaile aina kissaa ja hakeudu eläinlääkärin hoitoon, jos kissa nielee tuotetta. Varmista, että tuote säilytetään turvallisesti lasten ulottumattomissa ja erillään elintarvikkeista, eläinten ruuasta, lääkkeitä tai vastaavista tuotteista. Säilytä kuivassa paikassa. Hävitä tuote ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.


1.

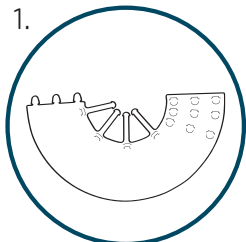


2.

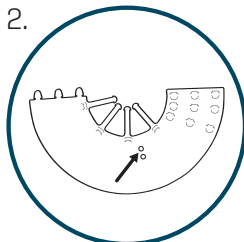

3.

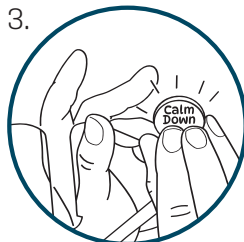

4.

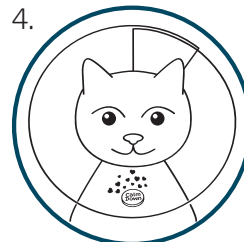

CalmDown

by KRUUSE®

CZ

CalmDown by KRUUSE® Pooperační Knoflík pro kočky.

Pomáhá kočkám cítit se bezpečně, pohodlně a klidně.

Nošení límce může být pro kočky stresující. Narušuje jejich vidění, čich a vnímání.

CalmDown by KRUUSE® Pooperační Knoflík uklidňuje kočky a má utišující účinek, protože napodobuje přirozené uklidňující feromony, které produkuje kočičí matka, aby utišila svá kořata.

Knoflík obsahuje vědecky testovaný feromon, který pomáhá uklidnit kočky ve stresových situacích.

Je neinvazivní, snadno se používá a funguje minimálně 10 dní.

Knoflík je vhodný pro psy všech věkových kategorií. Lze jej použít se všemi plastovými obojkami. Díky naší technologii kliknutí stačí stisknout knoflík na límci a nechat se uklidnit.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Vyberte si vhodný límec pro pacienta.
2. Najděte připravené otvory ve středu límce.
Pokud v límci nejsou žádné připravené otvory, použijte nástroj na vytváření otvorů CalmDown by KRUUSE® k vytvoření otvorů v límci. Postupujte podle pokynů na obalu nástroje na vytváření otvorů.
3. Umístěte knoflík na vnitřní stranu límce tak, aby logo směřovalo dovnitř směrem ke kočce.
4. Po vložení knoflíku se okamžitě uvolní uklidňující feromony.

Uklidňující feromon: 2 %

Inertní složky: 98 %

Hmotnost: 2.0 g.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Pouze pro zvířata. Po kontaktu s tlačítkem si důkladně umyjte ruce. Pokud dojde k podráždění kůže, vyhledejte lékařskou pomoc a vezměte si s sebou toto balení. Vždy kočku sledujte a v případě požití přípravku vyhledejte veterinárního lékaře. Zajistěte bezpečnou úschovu výrobku mimo dosah dětí a odděleně od potravin, krmiv pro zvířata, léků nebo podobných předmětů. Skladujte na suchém místě. Výrobek i obal zlikvidujte podle místních předpisů.

HU

CalmDown by KRUUSE® Műtét utáni gomb macskáknak.

Segít a macskáknak biztonságban, kényelmesen és nyugodtan érezni magukat.

A gallér viselése stresszes lehet a macskák számára. Zavarja látásukat, szaglásukat és tudatukat.

A CalmDown by KRUUSE® Műtét utáni gomb megnyugtatja a macskákat és csillapító hatású, mert utánozza a természetes nyugalmat adó feromonokat, amelyeket az anyamacska termel a kölykei számára.

A gomb egy tudományosan tesztelt feromont tartalmaz, amely segít megnyugtatni a macskákat stresszes helyzetekben.

Nem invazív, könnyen használható és legalább 10 napig működik.

A gomb minden korosztály számára alkalmas. Minden műanyag nyakörvvel használható.

Kattintásos technológiánkkal csak nyomja meg a gombot a nyakörvön, és a páciens máris nyugodtabb lesz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Válassza ki a megfelelő gallért a beteg számára.
2. Keresse meg az előzetesen ütött lyukakat a gallér közepén.
Ha a galléron nincsenek előre lyukasztott lyukak, használja a CalmDown by KRUUSE® lyukasztót a galléron a lyukak létrehozásához. Kérjük, kövesse a lyukasztó csomagolásán található utasításokat.
3. Győződjön meg róla, hogy a gomb a gallér belső oldalán van, és a logó befelé, a macska felé néz.
4. A gomb behelyezése után a nyugtató feromonok azonnal felszabadulnak.




Nyugtató feromon: 2%

Nem aktív összetevők: 98%

Súly: 2.0 g.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Kizárólag állati felhasználásra. A gombbal való érintkezés után alaposan mosson kezét. Ha bőrirritáció lép fel, forduljon orvoshoz, és vigye magával a csomagolást. Mindig figyelje a macskát, és forduljon állatorvoshoz, ha a macska lenyeli a terméket. Gondoskodjon arról, hogy a terméket biztonságosan, gyermekek számára elérhetetlen helyen, valamint élelmiszertől, takarmánytól, gyógyszertől vagy hasonló tárgyaktól távol tárolja. Száraz helyen tárolja. A terméket és a csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

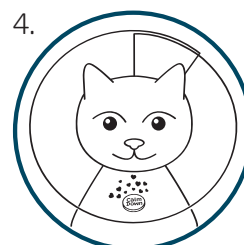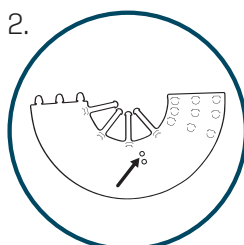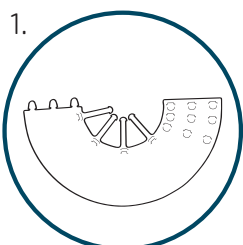



CalmDown

by KRUUSE®

BG

CalmDown by KRUUSE® Медальон за котки.

Помага на котките да се чувстват в безопасност, удобно и спокойно.

Носенето на нашийник може да бъде стресиращо за котките. Това пречи на зрението, обонянието и осъзнаването им.

CalmDown by KRUUSE® Медальон облекчава състоянието на котките и има успокоителен ефект, тъй като имитира естествените успокояващи феромони, произведени от майката за успокоение на малките котенца.

Бутонът съдържа научно тестван феромон, който помага за успокояване на котките в стресови ситуации.

Той е неинвазивен, лесен за употреба и действа поне 10 дни.

Устройството е подходящо за кучета на всякаква възраст. Може да се използва с всички пластмасови яки.

Благодарение на технологията за щракване, просто щракнете върху бутона на нашийника и останете спокойни.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

1. Изберете подходящия нашийник за вашия пациент.
2. Намерете предварително пробитите дупки в центъра на нашийника. Ако в яката няма предварително пробити отвори, използвайте апликатора за отвори CalmDown by KRUUSE®, за да направите отвори в нашийника. Моля, следвайте инструкциите на опаковката за
3. Уверете се, че копчето е поставено от вътрешната страна на нашийника, като логото е обърнато навътре към котката.
4. След като бутонът се постави, веднага се освобождават успокояващи феромони.

Успокояващ феромон: 2%

Инертни съставки: 98%

Тегло: 2.0 g.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се използва само за животни. Измийте добре ръцете си след контакт с бутона. Ако се появи дразнене на кожата, потърсете лекарска помощ и вземете със себе си опаковката. Винаги наблюдавайте котката и потърсете ветеринарна помощ, ако котката погълне продукта. Уверете се, че продуктът се съхранява на безопасно място, недостъпно за деца, и далеч от храни, фуражи, лекарства или подобни продукти. Съхранявайте на сухо място. Изхвърлете продукта и опаковката в съответствие с местните разпоредби.

RO

CalmDown by KRUUSE® Nasture Post-Operator pentru pisici.

Ajută pisicile să se simtă în siguranță, confortabile și relaxate.

Purtarea unui guler poate fi stresantă pentru pisici. Aceasta interferează cu vederea, mirosul și conștientizarea lor.

CalmDown by KRUUSE® Nasturele post-operator calmează pisicile și are un efect liniștitor, simulând feromonii naturali de calmare pe care o pisică mamă îi produce pentru a-și liniști puii.

Butonul conține un feromon testat științific care ajută la calmarea pisicilor în situații stresante.

Este neinvaziv, ușor de utilizat și acționează timp de cel puțin 10 zile.

Nasturele este potrivit pentru pisicile de toate vârstele. Poate fi folosit cu toate gulerele din plastic.

Cu tehnologia noastră tip clic, trebuie doar să faceți clic pe butonul de pe guler și să lăsați liniștea să se instaleze.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Alegeți zgarda potrivită pentru pacientul dumneavoastră.
2. Găsiți găurile pre-perforate în centrul gulerului. Dacă nu există găuri pre-perforate în guler, utilizați perforatorul CalmDown by KRUUSE® pentru a crea găuri în guler. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe ambalaj pentru perforatorul de găuri.
3. Asigurați-vă că butonul este plasat în interiorul zgărzii, cu logo-ul orientat spre interior către câine.
4. Odată introdus butonul, feromonii calmați sunt eliberați imediat.

Feromon calmant: 2%


Ingrediente inerte: 98%

Greutate: 2.0 g.


INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

Exclusiv pentru uz animal. Spălați-vă bine mâinile după contactul cu butonul. Dacă apare iritarea pielii, solicitați sfatul medicului și prezentați ambalajul. Monitorizați întotdeauna pisica și solicitați asistență veterinară dacă pisica îngerează produsul. Asigurați-vă că produsul este depozitat în siguranță, că nu este lăsat la îndemâna copiilor și că este ferit de alimente, de furaje pentru animale, de medicamente sau de articole similare. Depozitați într-un loc uscat. Aruncați produsul și ambalajul în conformitate cu reglementările locale.

1.

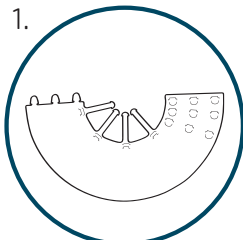


2.

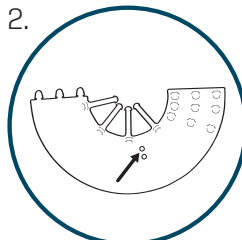

3.



4.

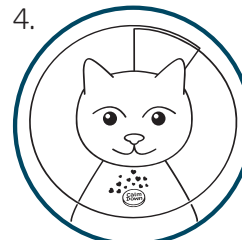

CalmDown

by KRUUSE®

SK

CalmDown by KRUUSE® Pooperačný Gombík pre mačky.

Golier umožňuje mačkám cítiť sa bezpečne, pohodlne a uvoľnene.

Nosenie goliera môže u mačiek vyvolať stres. Obmedzuje ich videnie, čuch a ostrážitosť.

Gombík CalmDown by KRUUSE® Pooperačný upokojuje mačky a má utišujúci účinok, pretože napodobňuje prirodzené upokojujúce feromóny, ktoré mačacia matka produkuje na utíšenie svojich mačiatok.

Gombík obsahuje vedecky testovaný feromón, ktorý pomáha upokojiť mačky v stresových situáciách.

Je neinvazívny, ľahko sa používa a funguje minimálne 10 dní.

Gombík je vhodný pre psov všetkých vekových kategórií. Môže sa používať so všetkými plastovými obojkami.

S našou technológiou kliknutím jednoducho kliknite na gombík na golieri a váš domáci miláčik sa hneď upokojí.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Vyberte vhodný golier pre vášho pacienta.
2. Nájdite vopred vytvorené otvory v strede goliera.
Ak na golieri nie sú žiadne otvory, použite aplikátor na vytvorenie otvorov na golieri použite aplikátor CalmDown by KRUUSE® Hole Applicator Postupujte podľa pokynov na obale aplikátora Hole Applicator.
3. Uistite sa, že gombík je umiestnený na vnútornej strane goliera tak, aby logo smerovalo dovnútra smerom k mačke.
4. Po vložení gombíka sa upokojujúce feromóny okamžite uvoľnia.

Upokojujúce feromóny: 2 %

Inertné ingrediencie: 98 %

Hmotnosť: 2.0 g.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Len pre zvieratá. Po kontakte s gombíkom si dôkladne umyte ruky. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc a vezmite so sebou obal. Vždy sledujte mačku a vyhľadajte veterinárnu pomoc, ak mačka výrobok prehltnie. Zaisťte bezpečnú úschovu výrobku mimo dosahu detí a oddelene od potravín, krmiva pre zvieratá, liekov alebo podobných predmetov. Skladujte na suchom mieste. Výrobok a obal zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

SL

Pooperacijski Gumb za mačke CalmDown by KRUUSE®

Pomaga mačkam, da se počutijo varno, udobno in sproščeno.

Nošenje ovratnice je za mačke lahko stresno. Moti njihov vid, vonj in zaznavanje okolice.

Pooperacijski Gumb CalmDown by KRUUSE® tolaži mačke in ima blažilen učinek, saj posnema naravne pomirjujoče feromone, ki jih proizvaja mačja mati, da pomiri svoje mladiče.

Gumb vsebuje znanstveno preizkušen feromon, ki pomaga pomiriti mačke v stresnih situacijah.

Je neinvaziven, enostaven za uporabo in deluje vsaj 10 dni.

Gumb je primeren za pse vseh starosti. Uporablja se lahko z vsemi plastičnimi ovratnicami.

Z našo tehnologijo na klik preprosto kliknite gumb na ovratnici in počakajte, da se žival umiri.

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Izberite primerno ovratnico za vašega pacienta.
2. Poiščite predhodno narejene luknje na sredini ovratnice.
Če v ovratniku ni predhodno izdelanih lukenj, uporabite aplikator za delanje lukenj CalmDown by KRUUSE® za izdelavo lukenj na ovratnici. Upoštevajte navodila na embalaži aplikatorja za delanje lukenj.
3. Prepričajte se, da je gumb nameščen na notranji strani ovratnice, logotip pa je obrnjen navznoter proti mački.
4. Ko je gumb nameščen, se takoj sprostijo pomirjujoči feromoni.





Pomirjujoč feromon: 2 %

Neaktivne sestavine: 98 %

Teža: 2.0 g.

VARNOSTNA NAVODILA:

Za uporabo izključno pri živalih. Po stiku z gumbom si temeljito umijte roke. Če nastopi draženje kože, poiščite zdravniško pomoč in s seboj vzemite embalažo. Če mačka zaužije izdelek, jo vedno opazujte in poiščite veterinarsko pomoč. Poskrbite, da bo izdelek shranjen varno, zunaj dosega otrok in stran od hrane, živalske krme, zdravil ali podobnih predmetov. Shranjujte v suhem prostoru. Izdelek in embalažo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

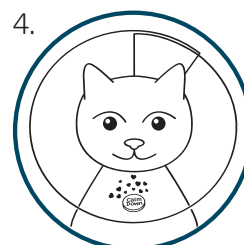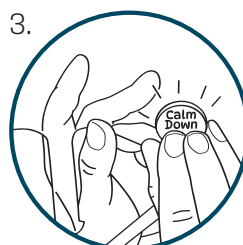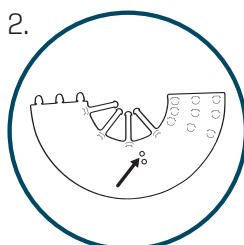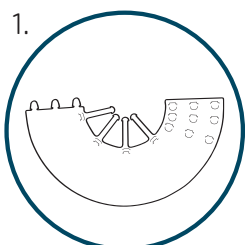



CalmDown

by KRUUSE®

ET

CalmDown by KRUUSE® Operatsioonijärgne Nupp kassidele.

Aitab kassidel tunda end turvaliselt, mugavalt ja pingevabalt.

Krae kandmine võib kassidele stressi tekitada. See häirib nende nägemist, lõhnataju ja meeleerksust.

CalmDown by KRUUSE® Operatsioonijärgne Nupp lohutab kasse ja mõjub rahustavalt, sest matkib loomulikke lohutavaid feromooni, mida emane kass oma poegade rahustamiseks toodab.

Nupp sisaldab teaduslikult testitud feromooni, mis aitab kasse stressirohketes olukordades rahustada.

See ei ole invasiivne, seda on lihtne kasutada ja see toimib vähemalt 10 päeva.

Nupp sobib igas vanuses koertele. Seda saab kasutada kõikide plastist kraedega.

Klõpsake meie klõps-tehnoloogiaga lihtsalt nupp kaelarihmale ja rahu ongi tagatud.

KASUTUSJUHEND:

1. Valige oma patsiendile sobiv krae.
2. Leidke krae keskelt eelnevalt tehtud augud.
Kui krae sisse ei ole auke tehtud, kasutage aukude tegemiseks CalmDown by KRUUSE® augustajat. Palun järgige augustaja pakendil olevaid juhiseid.
3. Veenduge, et nupp oleks asetatud krae siseküljele, nii et logo oleks sissepoole, kassi poole.
4. Kui nupp on paigutatud, vabanevad sellest kohe rahustavad feromoonid.

Rahustav feromoon: 2%
Inertsed koostisosad: 98%
Kaal: 2.0 g.

OHUTUSJUHISED:

Kasutamiseks ainult loomadel. Peske pärast nupuga kokkupuutumist hoolikalt käsi. Kui tekib nahaärritus, pöörduge arsti poole ja võtke pakend kaasa. Jälgige alati kassi ja pöörduge loomaarsti poole, kui kass neelab toodet alla. Hoidke toodet ohutult, lastele kättesaamatus kohas ja eemal toidust, loomasöödast, ravimitest või muudest sarnastest toodetest. Hoida kuivas kohas. Kõrvaldage toode ja pakend kohalike eeskirjade kohaselt.

LV

CalmDown by KRUUSE® Pēcoperācijas poga kaķiem.

Palīdz kaķiem justies droši, ērti un mierīgi.

Nepieciešamība valkāt kakla siksnu kaķiem var radīt stresu. Tas traucē viņu redzei, ožai un modrībai.

CalmDown by KRUUSE® Pēcoperācijas Poga mierina kaķus, un tai ir nomierinošs efekts, jo tā atdarina dabiskos mierinošos feromonus, ko kaķene izdala, lai nomierinātu savus kaķēnus.

Poga satur zinātniski pārbaudītu feromonu, kas palīdz nomierināt kaķus stresa situācijās.

Tas ir neinvazīvs, viegli lietojams un darbojas vismaz 10 dienas.

Poga ir piemērota visu vecumu suņiem.

To var izmantot ar visām plastmasas apkaklēm.

Izmantojot mūsu klikšķu tehnoloģiju, vienkārši noklikšķiniet pogu uz kakla siksnas un ļaujiet iestāties mieram.




LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Izvēlieties savam pacientam piemērotu kakla siksnu.
2. Atrodiet iepriekš perforētos caurumus kakla siksnas vidū.
Ja kakla siksnai nav iepriekš perforētu caurumu, izmantojiet the CalmDown by KRUUSE® caurumotāju, lai izveidotu caurumus kakla siksnā. Lūdzu, izpildiet norādījumus, kas sniegti uz caurumotāja iepakojuma.
3. Pārliecinieties, vai poga ir novietota kakla siksnas iekšpusē, ar logotipu pavērstu uz iekšpusi pret kaķi.
4. Kad poga ir ievietota, nomierinošie feromoni nekavējoties izdalās.

Nomierinošs feromons: 2%
Inertas sastāvdaļas: 98%
Svars: 2.0 g.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Paredzēts vienīgi dzīvniekiem. Pēc saskares ar pogu rūpīgi nomazgājiet rokas. Ja rodas ādas kairinājums, meklējiet medicīnisku palīdzību un ņemiet līdzi iepakojumu. Vienmēr uzraugiet kaķi un meklējiet veterinārārsta palīdzību, ja kaķis norij šo produktu. Pārliecinieties, ka produkts tiek uzglabāts droši, bērniem nepieejamā vietā un prom no pārtikas, dzīvnieku barības, medikamentiem vai līdzīgiem priekšmetiem. Uzglabāt sausā vietā. Izmetiet izstrādājumu un iepakojumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

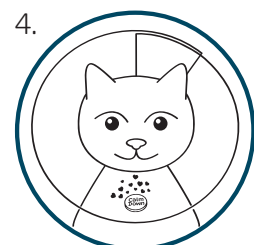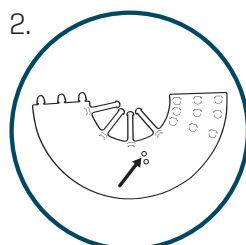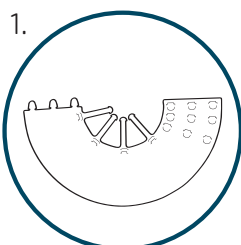

CalmDown

by KRUUSE®

LT

CalmDown by KRUUSE® Pooperacinis Mygtukas skirtas katėms.

Padedą katėms jaustis saugiai, patogiai ir atsipalaidavusioms.

Apykaklės dėvėjimas katėms gali sukelti stresą. Tai trukdo jų regėjimui, uoslei ir suvokimui.

CalmDown by KRUUSE® Pooperacinis Mygtukas suteikia katėms paguodos ir turi raminamąjį poveikį, nes imituoja natūralius raminamuosius feromonus, kuriuos skleidžia kačių patelės, kad nuramintų savo kačiukus.

Mygtuko viduje yra moksliskai ištirto feromono, padedančio nuraminti kates stresą keliančiose situacijose.

Tai neinvazinis produktas, kurį paprasta naudoti ir kuris veikia mažiausiai 10 dienų.

Erstat med: Mygtukas tinka įvairaus amžiaus katėms. Mygtuką galima naudoti su visais plastikiniais antkakliais.

Dėl spustelėjimo technologijos pakanka spustelėti mygtuką ant apykaklės ir pasklinda ramybė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Pasirinkite pacientui tinkamą apykaklę.
2. Apykaklės centre raskite iš anksto išmuštas skylutes. Jei apykaklėje nėra iš anksto padarytų skylučių, naudokite CalmDown by KRUUSE® skylių išmušiklį, kad apykaklėje padarytumėte skylutes. Laikykitės ant skylių išmušiklio pakuotės pateiktų nurodymų.
3. Įsitinkite, kad mygtukas yra apykaklės vidinėje pusėje, o logotipas nukreiptas į vidų, link katės.
4. Įdėjus mygtuką, iš karto paskleidžiami raminamieji feromoni.

Raminamasis feromonas: 2 %
Inertinės sudedamosios dalys: 98 %
Svoris: 2.0 g.

SAUGOS INSTRUKCIJOS:

Skirta naudoti tik gyvūnams. Po sąlyčio su mygtuku kruopščiai nusiaplaukite rankas. Jei pasireiškė odos dirginimas, kreipkitės į gydytoją ir turėkite su savimi pakuotę. Visada stebėkite katę ir kreipkitės į veterinarijos gydytoją, jei katė praryja produkto. Užtikrinkite, kad produktas būtų laikomas saugiai, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atokiau nuo maisto, pašarų, vaistų ar kitokių panašių daiktų. Laikykite sausoje vietoje. Produktą ir pakuotę utilizuokite laikydamiesi vietinių saugumo taisyklių.

HR

CalmDown by KRUUSE® Gumb nakon operacije za mačku.

Pomaže mačkama da se osjećaju sigurno, ugodno i opuštano.

Nošenje ovratnika može biti stresno za mačku. Ometa njihov vid, miris i orijentaciju.

CalmDown by KRUUSE® Gumb Nakon Operacije tješi mačku i djeluje umirujuće jer oponaša prirodne utješne feromone koje majka mačka proizvodi kako bi umirila svoje mačiče.

Gumb sadrži znanstveno ispitani feromon koji pomaže umiriti mačku u stresnim situacijama.

Nema invazivna svojstva, jednostavno se upotrebljava i djeluje najmanje 10 dana.

Gumb je prikladan za pse svih dobnih skupina. Može se upotrebljavati sa svim plastičnim ovratnicima.

Uz našu tehnologiju klika jednostavno kliknite gumb na ovratniku i tako osigurajte umirujuć učinak.




UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Odaberite odgovarajući ovratnik za svojeg pacijenta.
2. Pronađite prethodno izbušene rupe u sredini ovratnika. Ako na ovratniku nema prethodno izbušenih rupa, upotrijebite CalmDown by KRUUSE® Aplikator za rupe da biste izbušili rupe na ovratniku. Slijedite upute na ambalaži za Aplikator za rupe.
3. Provjerite je li gumb postavljen s unutarnje strane ovratnika, s logotipom okrenutim prema unutra prema mački.
4. Nakon što se gumb umetne, odmah se oslobađaju umirujuć feromoni.

Umirujuć feromon: 2 %
Inertni sastojci: 98 %
Težina: 2.0 g.

SIGURNOSNE UPUTE:

Samo za životinjsku uporabu. Temeljito operite ruke nakon što dodirnete gumb. Ako dođe do iritacije kože, potražite savjet liječnika i ponesite ambalažu sa sobom. Uvijek nadzirite mačku i potražite veterinarsku pomoć ako mačka proguta proizvod. Pobrinite se da je proizvod skladišten na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece i daleko od hrane, hrane za životinje, lijekova ili sličnih predmeta. Čuvati na suhom mjestu. Odložite proizvod i ambalažu u skladu s mjesnim propisima.

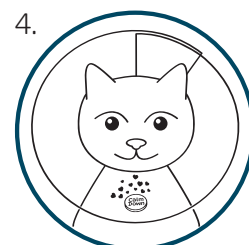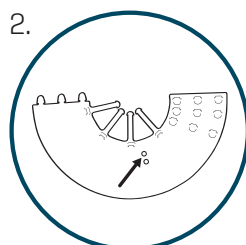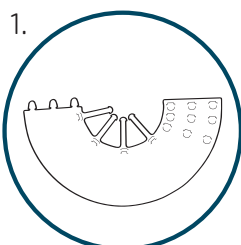

CalmDown

by KRUUSE®

EL

CalmDown by KRUUSE® Μετεγχειρητικό κουμπί για γάτες

Βοηθά τις γάτες να αισθάνονται ασφαλείς, άνετες και χαλαρές.

Η χρήση κολάρου μπορεί να είναι αγχωτική για τις γάτες. Παρεμβαίνει στην όραση, την οσμή και την αντίληψή τους.

CalmDown by KRUUSE® Το μετεγχειρητικό κουμπί ανακουφίζει τις γάτες και έχει καταπραϋντική δράση, επειδή μιμείται τις φυσικές ανακουφιστικές φερομόνες που παράγει η μητέρα για να καθησυχάσει τα γατάκια της.

Το κουμπί περιέχει μια επιστημονικά ελεγμένη φερομόνη που βοηθά στην ανακούφιση των γάτων σε αγχωτικές καταστάσεις.

Είναι μη επεμβατικό, εύκολο στη χρήση και λειτουργεί για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Το κουμπί είναι κατάλληλο για σκύλους κάθε ηλικίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα πλαστικά περιλαίμια.

Με την τεχνολογία «Χρήση με ένα κλικ», απλώς κάντε κλικ στο κουμπί στο κολάρο και αφήστε την ηρεμία να εδραιωθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Επιλέξτε το κατάλληλο κολάρο για τον ασθενή σας.
2. Βρείτε τις ήδη τρυπημένες οπές στο κέντρο του κολάρου.
Εάν δεν υπάρχουν ήδη τρυπημένες οπές στο κολάρο, χρησιμοποιήστε το Απλικατέρ οπών CalmDown by KRUUSE® για να δημιουργήσετε οπές στο κολάρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του Απλικατέρ οπών.
3. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του κολάρου, με το λογότυπο στραμμένο προς τα μέσα προς τη γάτα.
4. Μετά την τοποθέτηση του κουμπιού, οι καταπραϋντικές φερομόνες απελευθερώνονται αμέσως.

Καταπραϋντική φερομόνη: 2%

Αδρανή συστατικά: 98%

Βάρος: 2.0 γρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Μόνο για χρήση σε ζώα. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την επαφή με το κουμπί. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, αποταθείτε σε ιατρό και φέρτε μαζί σας τη συσκευασία. Πάντα να παρακολουθείτε τη γάτα και να αναζητάτε κτηνιατρική φροντίδα εάν η γάτα καταπιεί το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν φυλάσσεται με ασφάλεια, μακριά από παιδιά και μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές, φάρμακα ή παρόμοια αντικείμενα. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος. Απορρίψτε το προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

